

## F Lightweight Homecraft tabourets de douche réglable en hauteur

### Introduction

Ce tabouret pour douche Homecraft est un tabouret léger, réglable en hauteur qui ne rouille pas, fabriqué avec des tubes en aluminium et disposant d'un siège en plastique. Il possède des poignées latérales intégrées qui permettent plus de stabilité et un meilleur maintien de l'utilisateur. Un coussin pour le siège est proposé en option pour plus de confort et une touche de luxe (vendu séparément).

### Utilisations prévues

En cas de handicap, le tabouret offre une surface d'assise aux personnes pendant la douche.

### Consignes de montage (version à monter uniquement)

- Retirer tout l'emballage
- Prendre le cadre en forme de A (A) et fixer les barres transversales (B) en s'assurant que les tiges sortent entièrement, voir fig. 1
- Répéter la même opération de l'autre côté du tabouret pour douche, voir fig. 2
- Faire glisser les pieds dans la base du cadre en s'assurant que les orifices de chaque partie sont alignés.
- Introduire les loquets à la hauteur requise en s'assurant que les quatre pieds sont positionnés à la même hauteur, voir fig. 3
- Placer le siège en plastique (C) sur les barres transversales et pousser jusqu'à ce que les loquets du siège soient en place, voir fig. 4

- Un tabouret pour douche monté correctement est illustré sur la fig.5


### Réglage de la hauteur

- Pour régler la hauteur, prendre le loquet entre le pouce et l'index et le faire sortir
- Faire glisser le pied en haut ou en bas jusqu'à la position requise
- Pousser à nouveau le loquet fermement dans l'orifice
- Répéter la même opération pour les autres pieds en s'assurant que les quatre pieds sont réglés à la même hauteur

### Entretien et nettoyage

Le tabouret pour douche en aluminium Homecraft ne requiert qu'un entretien limité. Pour le nettoyer, passez un chiffon doux humide. Utilisez un produit détergeant neutre et de l'eau tiède. Le siège pour douche peut être placé sous l'eau à basse pression ou sous la douche pour un meilleur nettoyage. Le siège en plastique peut être retiré pour un meilleur entretien. Ne pas utiliser de produits d'entretien abrasifs ou à base de javel pour éviter la décoloration. Pour le désinfecter, nettoyez-le tel que décrit ci-dessus et passez un chiffon imbibé d'une solution désinfectante à base de chlore actif de 1000ppm (Haz Tabs/Precept), rincez et séchez.

	Description	New Code
1	Fixé	09 132 5356
2	À Monter	09 156 4749
3	Protection De Siège FACULTATIVE	09 156 4756

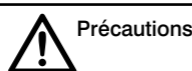


### Précautions

- Le tabouret pour douche ne doit jamais être utilisé pour monter dessus
- S'assurer que les pieds de l'utilisateur sont bien placés au sol lors de l'utilisation du tabouret
- S'assurer que les quatre pieds sont placés à la même hauteur
- Ne jamais dépasser le poids maximum indiqué pour l'utilisateur (190 kg)
- Ne pas entreposer à des températures inférieures à zéro
- Vérifier régulièrement si les orifices d'ajustement sont élargis ou soumis à des contraintes
- Vérifier que les embouts en caoutchouc et les loquets ne sont pas cassés, usés ou lâches
- Ne pas utiliser si le siège est endommagé ou fendu
- En l'absence de dossier, ne pas se pencher en arrière lors de l'utilisation du tabouret pour douche

### Garantie

Les tabourets pour douche en aluminium Homecraft sont garantis pendant un an à compter de la date d'achat pour tout défaut de fabrication et matériaux. Contactez votre fournisseur/distributeur en cas de défaut. La garantie ne couvre pas les frais indirects liés au transport inapproprié, et en particulier les frais d'expédition, les pertes de recettes, les dépenses, etc. Le fabricant n'accepte aucune responsabilité concernant tout dommage ou blessure découlant d'une utilisation erronée ou suite au non-respect des consignes ci-dessus.




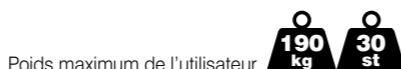


Poids maximum de l'utilisateur

## Homecraft Lightweight Adjustable Height Shower Stools

	Description	New Code
1	Fixed	09 132 5356
2	Flat Packed	09 156 4749
3	Optional Seat Cover	09 156 4756

Please read these instructions carefully and retain for future reference

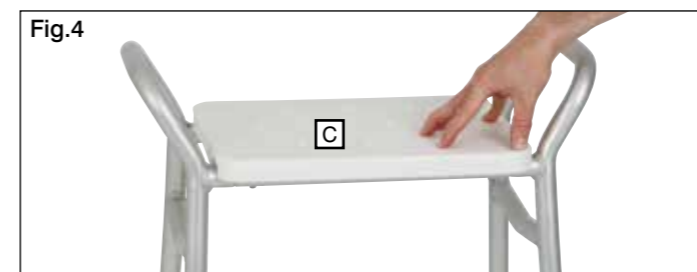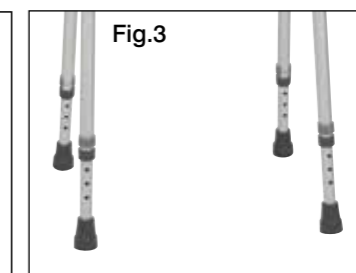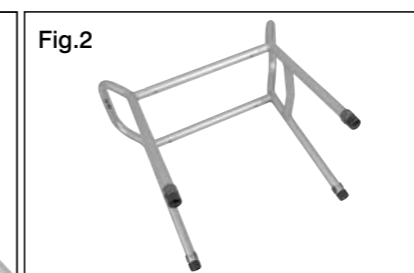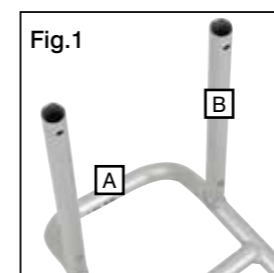

Maximum user weight

### Introduction

This Homecraft Shower Stool is a lightweight, height adjustable, non-rusting shower stool manufactured from aluminium tubing and fitted with a plastic seat. It has built-in side handles which offer stability and additional support to the user. There is an optional seat pad for additional comfort and luxury (sold separately).

### Intended Uses

To compensate for a disability by providing a sitting surface for a person taking a shower.

### Assembly Instructions (Flat packed version only)

- Remove all packaging
- Take the A-shaped frame (A) and attach the cross bars (B) ensuring the push pins are fully protruded, see fig.1
- Repeat for the other side of the shower stool, see fig.2
- Slide the legs into the base of the frame ensuring that the holes in each section are aligned
- Clip in the 'snap locks' at the required height, ensuring all four legs are positioned at the same height, see fig.3
- Set the plastic seat (C) over the cross bars and push until the seat clips into position, see fig.4
- A correctly fitted shower stool is featured in fig.5

### CAUTIONS

- Under no circumstances should the shower stool be used for standing
- Ensure users feet are firmly placed on the floor when using the stool
- Ensure all four legs are positioned at the same height
- Never exceed the stated maximum user weight of 190kg / 30st
- Do not store in sub-zero temperature
- Periodically check for elongated or stressed adjustment holes
- Check for split, worn or loose rubber ferrules and Snap Locks
- Do not use with a damaged or split seat
- As there is no back support, do not lean back when using this shower stool

### Height Adjustment

- To adjust the height grasp the 'snap lock' between the thumb and forefinger and pull it out
- Slide the leg in or out to the required position
- Push the clip back firmly into the hole
- Repeat the same procedure for the other legs making sure all four legs are adjusted to the same height

### Care and Cleaning

The Homecraft Aluminium Shower Stool is designed for minimum maintenance. To clean, wipe over with a wet soft cloth. Use general purpose neutral detergent and warm water. The shower chair may be placed under running water at low pressure or showered down to assist cleaning. The plastic seat can be unclipped to make cleaning easier. Do not use harsh abrasives or bleach based cleaners to avoid discolouration. To disinfect clean as above and wipe over with solution of one thousand parts per million available chlorine disinfectant (Haztabs/Precept), rinse and dry.

### Warranty Information

The Homecraft Shower Stools are warranted for one year from date of purchase due to faulty workmanship and materials. Please contact your supplier/dealer should a fault occur. The warranty does not extend to the consequential costs resulting from fault clearance, in particular freight and travel costs, loss of earnings, expenses etc. The manufacturer will not accept responsibility for any damage or injury caused by misuse or non-observance of the instructions set out above.

These user instructions are available in large print, please contact Performance Health Customer Services for a copy. Please retain these instructions for future reference.

**Performance Health International Ltd.**  
Nunn Brook Road, Huthwaite,  
Sutton-in-Ashfield, Nottinghamshire,  
NG17 2HU, UK.

**UK:**  
Tel: 03448 730 035  
Fax: 03448 730 100

www.performancehealth.co.uk

**International:**  
Tel: +44 1623 448 706  
Fax: +44 1623 448 784

**Performance Health Supply, Inc.**  
W68 N158 Evergreen Blvd.  
Cedarburg, WI 53012, USA  
www.performancehealth.com

**Performance Health ANZ**  
Unit 3, 3 Basalt Road,  
Pemulwuy NSW, Australia 2145.  
Tel: 1300 473 422  
Fax: 1300 766 473  
www.performhealth.com.au

**Performance Health France**  
13 rue André Pingat, CS 10045,  
51724 Reims Cedex, France  
Tel: 00(33) 03 10 00 79 30  
Fax: 00(33) 03 54 70 04 34  
www.performancehealth.fr



