

buckingham glideboard


MADE IN UK



buckingham
healthcare



Scan for Usage

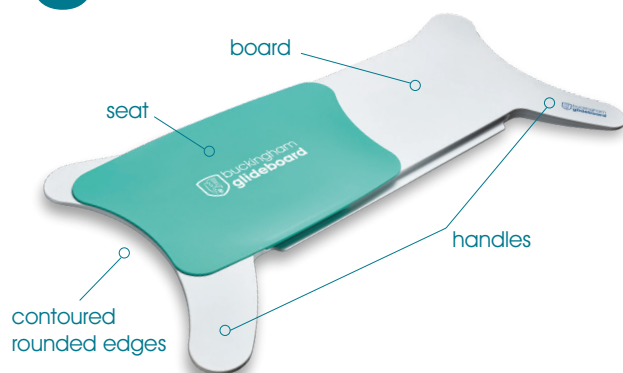

- Exciting new shape increases stability and safety
- Lightweight and multi-positional
- Easy to use around wheelchair arms
- The ease of use makes transfers easier and faster
- The moving seat reduces the effort for the both the user and care giver by over 31%

This is the Buckingham Glideboard and here's how to use it.

1	Pick up your glideboard and insert one end under your thigh, making sure both handles of the board are in contact with your wheelchair, forming a stable base for you to transfer.	2	The other end should be flat and positioned on the other surface where you want to glide towards.
3	As you slide yourself onto the glideboard make sure that your hand holds the seat in place under your thigh – you can do this by spreading your palm across both the board and the edge of the sliding seat.	4	This way you can be sure that your body is directly on top of the seat, before you glide from your wheelchair.
5	Next, place one hand on the surface you are heading towards whilst keeping the other on your chair for greatest stability and glide across. Make sure it is stable.	6	To remove the board, gently tilt to one side and pull the board away from the body.




Scan for Demo


Cleaning and Caring for your Glideboard

The Glideboard has been designed to give you years of trouble-free transfers between surfaces. To assist in this the Glideboard and seat should be cleaned regularly using warm soapy water and a sponge.

The seat easily detached from the board – simple place your fingers underneath the seat edge at the side of the board and pull up. The seat will snap off of the board allowing all surfaces to be easily and dried

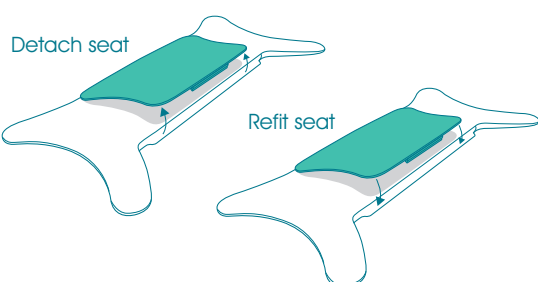

When you reattach, the seat make sure that it is the correct way round. If fitted the wrong way it could result in your skin or clothing being pinched which could be uncomfortable.

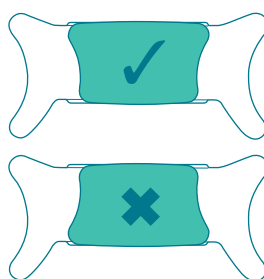

To refit the seat to the board simply take the seat and put one end of the seat in position on the board and push the other end down – the seat will easily “snap” firmly into position on the board.

When using your Glideboard take care to prevent food or other debris from getting under the seat between the seat and the board. Should this happen please clean both items before using.

The board can be used without the seat attached .

It is advised to wear undergarments when moving across the board to prevent any entrapment issues or skin shear.

If for any reason your board and seat become damaged you should stop using it for the intended purpose of surface transfers. Regularly inspect the board and seat for any cracks, fractures, weakness or any visible signs of damage.

Warranty – 12 months for any manufacturing defects.

Designed and Manufactured in the UK by Buckingham Healthcare Ltd

Please contact Buckingham Healthcare if you have any questions about the board or would like some additional information as to how to use it.

email: Glideboard@buckinghamhealthcare.com | Tel: 01258 839122 | web: www.buckinghamhealthcare.com

buckingham glideboard


MADE IN UK



buckingham
healthcare




Escaneo para uso

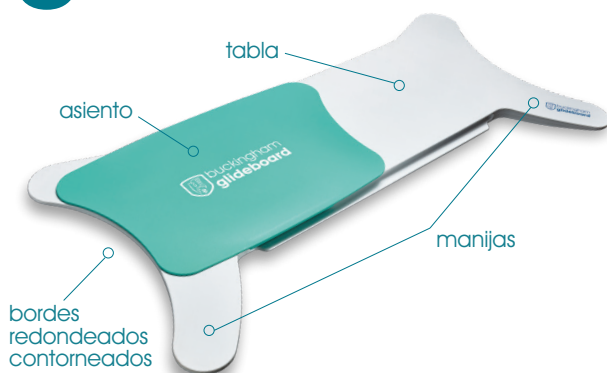

- Nueva y emocionante forma que aumenta la estabilidad y la seguridad
- Liviana y multiposicional
- Brazos de silla de ruedas fáciles de usar
- Transferencias más sencillas y rápidas gracias a la facilidad de uso
- El asiento móvil reduce el esfuerzo tanto para el usuario como para el cuidador en más de un 31 %.


Esta es la tabla deslizante Buckingham y, a continuación, se explica cómo usarla.

1

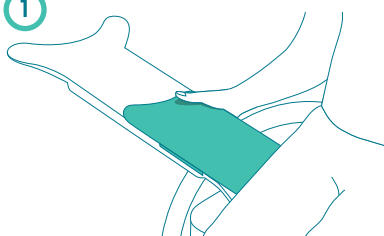


Levante la tabla deslizante e inserte un extremo debajo del muslo; asegúrese de que ambas asas de la tabla estén en contacto con la silla de ruedas y se forme una base estable para poder hacer la transferencia.

2

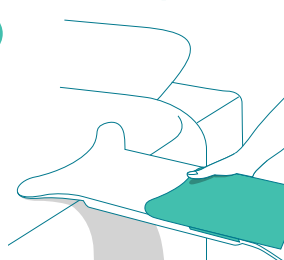


El otro extremo debe estar plano y colocado en la otra superficie hacia la que desea deslizarse.

3

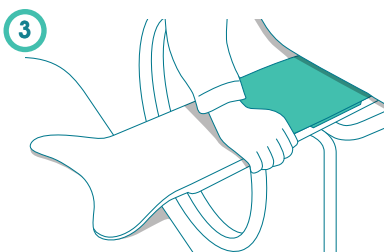

Mientras se desliza sobre la tabla, asegúrese de que la mano sostenga el asiento en su lugar debajo del muslo; puede hacerlo extendiendo la palma de la mano por la tabla y el borde del asiento deslizante.

4

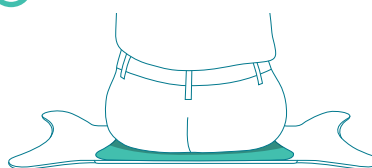

De esta manera, puede estar seguro de que su cuerpo está directamente encima del asiento, antes de deslizarse desde la silla de ruedas.

5



A continuación, coloque una mano en la superficie hacia la que se dirige mientras mantiene la otra en la silla para mayor estabilidad y deslizamiento. **Asegúrese de que sea estable.**

6

Para quitar la tabla, inclínala suavemente hacia un lado y tire de la tabla para separarla del cuerpo.




Escanear para demostración


Limpieza y cuidado de la tabla deslizante

La tabla deslizante se ha diseñado para brindarle años de transferencias entre superficies sin problemas. Para ayudar con esto, la tabla deslizante y el asiento deben limpiarse regularmente con agua tibia con jabón y una esponja.

El asiento se separa fácilmente de la tabla: simplemente coloque los dedos debajo del borde del asiento en el costado de la tabla y tire hacia arriba. El asiento se desprenderá de la tabla, lo que permitirá que todas las superficies se sequen fácilmente.

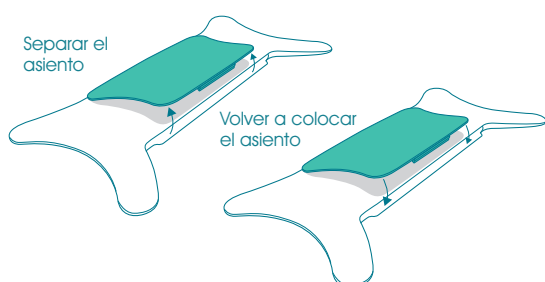

Cuando vuelva a colocarlo, asegúrese de que esté en el sentido correcto. Si se ajusta de forma incorrecta, podría pellizcarse la piel o la ropa, lo que podría resultar incómodo.

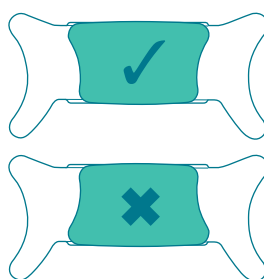

Para reajustar el asiento a la tabla, simplemente tome el asiento y coloque un extremo de este en su posición sobre la tabla y empuje el otro extremo hacia abajo; el asiento se "encajará" firmemente en la posición en la tabla.

Cuando use la tabla deslizante, evite que se introduzcan alimentos u otros residuos entre el asiento y la tabla. Si esto sucediera, limpie ambos elementos antes de usarlos.

La tabla se puede utilizar sin el asiento adjunto.

Se recomienda usar ropa interior al moverse por la tabla para evitar pellizcos o lesiones en la piel.

Si, por alguna razón, la tabla y el asiento se dañan, debe dejar de usarlos para el propósito previsto de transferencias de superficie. Inspeccione periódicamente la tabla y el asiento en busca de grietas, fracturas, debilidad o cualquier signo visible de daño.

Garantía: 12 meses para cualquier defecto de fabricación.

Diseñada y fabricada en el Reino Unido por Buckingham Healthcare Ltd
Comuníquese con Buckingham Healthcare si tiene alguna pregunta sobre la tabla
o si quisiera información adicional sobre cómo usarla.

Correo electrónico: Glideboard@buckinghamhealthcare.com | Tel: 01258 839122 | sitio web: www.buckinghamhealthcare.com